ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ
медичного виробу
«ВІАЛЬ® СЛЬОЗА»
лубрикант для лікування синдрому сухого ока

ТОРГОВА НАЗВА
«Віаль® сльоза».

ФОРМА ВИПУСКУ
Краплі. По 10 мл (ml) у флаконі поліетиленовому, закупореному крапельницею поліетиленовою та кришкою поліетиленовою гвинтовою з контролем розкриття.

ОПИС
Прозорий безбарвний або жовтуватий розчин. Стерильний.

СКЛАД: натрію карбоксиметилцелюлози – 5 мг (mg) в 1 мл (ml); кислота борна, натрію тетраборат 10-ти водний, натрію хлорид, калію хлорид, кальцію хлорид дигідрат, магнію хлорид гексагідрат, стабілізований оксихлорокомплекс, вода для ін'єкцій.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
- як засіб для щоденного зволоження слизової оболонки ока для збереження її захисних фізіологічних властивостей в умовах підвищеної сухості повітря;
- для усунення печіння та подразнення, спричинених сухістю ока, та попередження пов'язаних з ними ускладнень;
- полегшення дискомфорту, спричиненого подразненнями ока, а також впливом на нього вітру або сонця;
- при постійному перебуванні за комп'ютером, читанні, керуванні автомобілем;
- для очищення слизової оболонки ока від пилу, алергенів;
- з профілактичною метою для зволоження слизової оболонки ока при роботі в шкідливих умовах, при поганому освітленні, а також при зменшенні вироблення слізної рідини з віком та/або під впливом інших факторів чи станів.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Рекомендується закапувати медичний виріб «Віаль® сльоза» в кон'юнктивальний мішок кожного ока по 1-2 краплі.



Завдяки хімічному складу та концентрації, тривалість та кратність використання медичного виробу «Віаль® сльоза» не обмежені, виріб є безпечним при тривалому застосуванні, не викликає звикання. Сумісний з усіма типами контактних лінз.

Техніка закапування ока
1) Вимийте руки.
2) Встаньте перед дзеркалом і вказівним пальцем обережно потягніть нижню повіку, щоб сформувати місце для очних крапель.
3) Нахиліть голову назад і подивіться вгору.
4) Візьміть флакон великим і вказівним пальцями, тримаючи руку навпроти носу, і, злегка стиснувши флакон, закапайте рекомендовану кількість крапель в кон'юнктивальний мішок. Не торкайтесь кінчиком крапельниці рук, очей чи будь-якої поверхні, тому що це може призвести до забруднення розчину.
5) Проведіть цю процедуру з іншим оком.
6) Закрийте очі і порухайте ними з боку в бік.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

«Віаль® сльоза» призначений для індивідуального застосування.
Не застосовувати медичний виріб за наявності алергії на будь-який з компонентів. При сильному почервонінні, запаленні та болю в очах слід звернутися до лікаря-офтальмолога. Не використовувати медичний виріб одночасно з іншими препаратами або офтальмологічними засобами.
При закапуванні медичного виробу «Віаль® сльоза», до розподілення рідини на поверхні ока, може виникнути короткочасне відчуття нечіткості зору. Це нормально, відчуття зникає після моргання. Доки зір не нормалізується, не слід керувати автотранспортом або іншими механізмами.
Дослідження використання медичного виробу «Віаль® сльоза» в період вагітності або годування груддю не проводились. Наукові дані свідчать, що натрію карбоксиметилцелюлоза не всмоктується і таким чином не має системної дії. Тому будь-якого впливу на репродуктивну функцію чи на ембріофетальний розвиток не очікується.

Номер партії вказано на пакуванні.
Використати до кінця дати, зазначеної на пакуванні.
Не використовувати медичний виріб в разі пошкодження первинного пакування (флакону) до моменту першого розкриття.

Повідомлення про будь-який серйозний інцидент, який стався при застосуванні медичного виробу
Для забезпечення подальшого ефективного та безпечного застосування медичного виробу, просимо повідомляти про інциденти, виявлені у процесі застосування цього медичного виробу, АТ «Фармак» за телефоном +38 (044) 239 19 40.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати при температурі від 2 °С до 25 °С, в недоступному для дітей місці. Не заморожувати.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

2 роки. Не застосовувати після закінчення терміну придатності. Термін придатності після розкриття флакону – 28 діб.

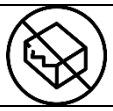
ВИРОБНИК

АТ «Фармак», Україна, 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 63.
www.farmak.ua

Дата останнього перегляду: 15.07.2026.

UA.TR.099

Графічні символи

	Виробник		Температурне обмеження
	Дата виготовлення		Зверніться до інструкції із застосування
	Символ можливості повторного використання та перероблення (PAP – з паперу та картону; 21 – інші види картону)		Стерилізовано методом асептичної обробки
 UA.TR.YYY	Знак відповідності Технічним регламентам (UA - умовне позначення України латинськими літерами; TR - умовне позначення, яке означає, що орган з оцінки відповідності призначено на виконання робіт з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів; YYY - ідентифікаційний номер призначеного органу з оцінки відповідності)		Номер партії
	Використати до		Не використовувати в разі пошкодження пакування
	Повторно не стерилізувати		Попередження